





DiegoFernandoPalomino

I N G E N I E R O

Especialista en afilado de instrumental
quirúrgico y odontológico

¿Qué hacemos?

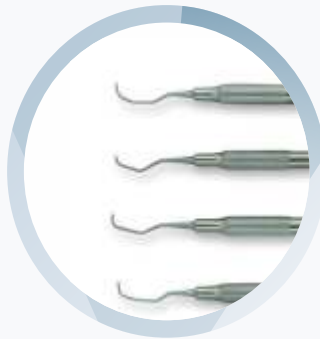
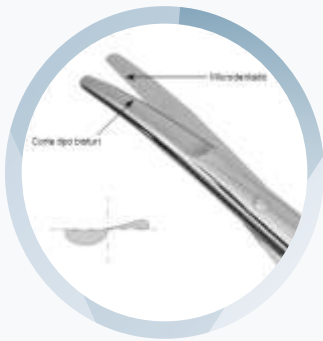


Con la experiencia adquirida como Ingeniero de procesos y especialista en afilados, se presta el servicio de afilado al instrumental quirúrgico, odontológico y de ortodoncia **Dando importancia a la restauración de los ángulos originales de corte y superficies de los instrumentos.** Esto se realiza utilizando equipos tecnológicos diseñados para tal proposito, logrando así conservar el instrumental, alargar la vida útil del mismo, recuperar superficies de corte, y una reducción sustancial en los costos de reposición del instrumental. De esta manera se le permite al profesional realizar mejores procedimientos. El servicio se presta en las clínicas o consultorios de nuestros clientes, garantizando con talento humano la aplicación de normas de bioseguridad y el cuidado adecuado de los instrumentos.



Ventajas del servicio:

1. Implementación del decreto 4725 de 2005 en la clasificación y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano. (de obligatorio cumplimiento).
2. Servicios realizado bajo la norma internacional SAE-AISI que regula la clasificación y manejo de aceros quirúrgicos.
3. Se cumple con requisitos de habilitación de la secretaria de salud, y programas de calidad interna.
4. Se obtiene una opción de recuperación y de alargar la vida útil del instrumental.
5. Se posterga o se anula la decisión de dar de baja instrumental, mejorando de esta forma los costos de operación.
6. Mejora los procedimientos quirúrgicos ya que elementos de corte con buen filo garantizan un procedimiento mas optimo para los pacientes.
7. Para el profesional se mejora las condiciones biomédicas en los procedimientos.
8. La relación costo beneficio supera la necesidad de adquirir nuevo instrumental.
9. Certificado de Mantenimiento y afilado valido para acreditación, habilitación y validación de procesos.
10. Personal Calificado y con experiencia en afilados.
11. Piedras diamantadas especiales para aceros quirúrgicos.

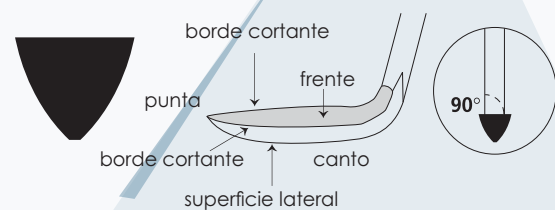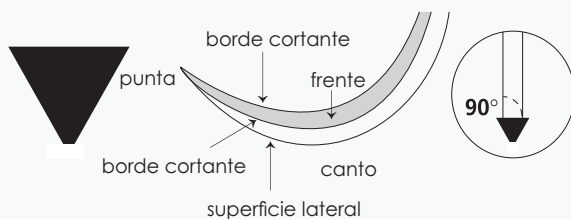

¿Cómo lo hacemos?

Inspección del instrumental:

La inspección del instrumental es un proceso visual que permite determinar cuales son los instrumentos que no cumplen con las condiciones para ser operados, cuales son reparables y cuales son adecuados para mantenimiento.

Limpieza y pulido del instrumental:

Mediante el uso de limpiadores especiales para aceros quirúrgicos, y maquinaria especializada se procede a pulir y crear una excelente presentación de los instrumentos, recuperando las superficies y la buena apariencia de los mismos.

Afilado de instrumental:

Es la parte más importante del proceso porque con el uso de los equipos adecuados, piedras diamantadas y el conocimiento profesional, se logra mantener o recuperar las superficies cortantes originales de los instrumentos que así lo requieran; mejorando la calidad operativa del instrumental, optimizando el procedimiento por parte del profesional, y garantizando mejores resultados en los procedimientos clínicos.

Personalización de instrumental: *(Opcional)*

Con el uso de cintas de colores y resistentes a altas temperaturas, se procede a marcar cada pieza para su mejor manipulación dentro de las áreas de trabajo.

Certificado de mantenimiento y afilado:

Una vez finalizado el servicio, se genera un certificado de mantenimiento y afilado del instrumental el cual es valido para cumplir con requisitos de acreditación, habilitación y validación de procesos que exigen los órganos de control.

